

# Suomi

## BAPA tube for T-TAS<sup>®</sup>01

**REF**

18004

**CONTENT**

50 putkea

### **Käyttötarkoitus**

BAPA tube for T-TAS 01 on tarkoitettu käytettäväksi T-TAS 01 -järjestelmän kanssa käytettävien verinäytteiden keräämiseen, kuljettamiseen ja varastointiin.

### **Yhteenveto**

BAPA (bentsyyli-sulfonyyli-D-argininyyli-prolyyli-4-amidinobentsyyliamidi), trombiinin ja tekijä Xa:n estäjä, mahdollistaa veren hyytymisen eston vaikuttamatta fysiologisiin kalsiumtasoihin.

BAPAn määritetty pitoisuus kerätyssä veressä on  $\geq 50 \mu\text{g/ml}$ .

### **Verenkeräysputki**

50 kpl 3 ml putkia, jotka sisältävät suihkukuivattua BAPA-antikoagulanttia

### **Varoitukset ja varotoimet**

- Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön.
- Vain koulutettujen ammattilaisten käyttöön.
- Ihmisverta tulee käsitellä mahdollisesti tartuttavana ja yleisiä varotoimia tulee noudattaa.
- Kaikkien jättemateriaalien hävittämisen tulee tapahtua paikallisten, osavaltion ja valtion ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä putkia, jos niissä on vieraita aineita.
- Älä käytä putkia niiden viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

### **Varotoimet veren keräämistä varten**

- Käytä veren keräämiseen koon 21 tai suurempireikäisiä neuloja (18–20 gauge).
- Sekoita veri kääntämällä putkea varovasti ylösalaisin 5 kertaa välittömästi täytön jälkeen.

### **Säilytys ja vakaus**

- Säilytä käyttämättömät keräysputket 5–30 °C:ssa. Vältä altistamista suoralle auringonvalolle.
- Tuote säilyy näissä olosuhteissa säilytettynä putken etikettiin painettuun viimeiseen käyttöpäivään asti.

Huomautus: Poikkeaminen suositelluista säilytysolosuhteista voi johtaa putken laadun heikkenemiseen.

## Viitteet

Katso lisätietoja putkella BAPA tube for T-TAS 01 tehdyistä mittauksista T-TAS 01 -käyttöoppaasta ja määrityksen pakkausselosteista.

## Symbolit



: Luettelonumero




: Eränumero



: Viimeinen  
käyttöpäivä



: In vitro -diagnostinen  
lääketieteellinen laite

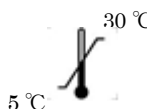

: Lämpötilaraja



: Älä käytä  
uudelleen



: Steriili



: Katso käyttöohjeet



: Määrä per  
laatikko




: CE-merkki



: Valtuutettu edustaja  
Euroopan yhteisössä



: Valmistaja

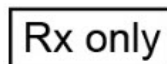

:Tämän tuotteen myynti on sallittu ainoastaan  
laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen  
toimesta tai määräyksestä



: Maahantuojaja



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

