

Suomi

BAPA tube

REF

18004

CONTENT

50 putkea

Käyttötarkoitus

BAPA tube on tarkoitettu käytettäväksi T-TAS -järjestelmän kanssa käytettävien verinäytteiden keräämiseen, kuljettamiseen ja varastointiin.

Yhteenveto

BAPA (bentsyylisulfonyyli-D-argininyyli-prolyyli-4-amidinobentsyyliamidi), trombiinin ja tekijä Xa:n estäjä, mahdollistaa veren hyytymisen eston vaikuttamatta fysiologisiin kalsiumtasoihin.

BAPAn määritetty pitoisuus kerätyssä veressä on $\geq 50 \mu\text{g/ml}$.

Verenkeräysputki

50 kpl 3 ml putkia, jotka sisältävät suihkukuivattua BAPA-antikoagulanttia

Varoitukset ja varotoimet

- Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön.
- Vain koulutettujen ammattilaisten käyttöön.
- Ihmisverta tulee käsitellä mahdollisesti tartuttavana ja yleisiä varotoimia tulee noudattaa.
- Kaikkien jättemateriaalien hävittämisen tulee tapahtua paikallisten, osavaltion ja valtion ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä putkia, jos niissä on vieraita aineita.
- Älä käytä putkia niiden viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Varotoimet veren keräämistä varten

- Käytä veren keräämiseen koon 21 tai suurempireikäisiä neuloja (18–20 gauge).
- Sekoita veri kääntämällä putkea varovasti ylösalaisin 5 kertaa välittömästi täytön jälkeen.

Säilytys ja vakaus

- Säilytä käyttämättömät keräysputket 5–30 °C:ssa. Vältä altistamista suoralle auringonvalolle.
- Tuote säilyy näissä olosuhteissa säilytettynä putken etikettiin painettuun viimeiseen käyttöpäivään asti.

Huomautus: Poikkeaminen suositelluista säilytysolosuhteista voi johtaa putken laadun heikkenemiseen.

Viitteet

Katso lisätietoja putkella BAPA tube tehdyistä mittauksista T-TAS -käyttöoppaasta ja määrittelyn pakkausselosteista.

Symbolit



: Luettelonumero




: Eränumero



: Viimeinen
käyttöpäivä



: In vitro -diagnostinen
lääketieteellinen laite

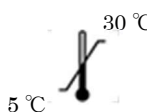

: Lämpötilaraja




: Älä käytä
uudelleen



: Steriili




: Katso käyttöohjeet

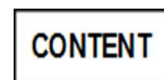

: Määrä per
laatikko




: CE-merkki

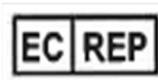

: Valtuutettu edustaja
Euroopan yhteisössä



: Valmistaja

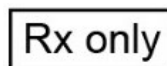

:Tämän tuotteen myynti on sallittu ainoastaan
laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen
toimesta tai määräyksestä



: Maahantuoja



ZACROS Corporation

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH

Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

