

## **Norsk**

# BAPA tube for T-TAS<sup>®</sup>01

**REF**

18004

**CONTENT**

50 rør

### **Tiltenkt bruk**

BAPA tubet for T-TAS 01 er beregnet på å brukes til innsamling, transport og lagring av blodprøver for bruk med T-TAS 01- systemet.

### **Sammendrag**

BAPA (Benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamid), en hemmer av trombin og faktor Xa, tillater antikoagulasjon av blod uten å forstyrre fysiologiske kalsiumnivåer.

Den spesifiserte konsentrasjonen av BAPA i oppsamlet blod er  $\geq 50 \mu\text{g/mL}$ .

### **Blodprøverør**

50 x 3 ml rør som inneholder spraytørket BAPA antikoagulant

### **Advarsler og forholdsregler**

- Kun for in vitro diagnostisk bruk.
- Kun til bruk av opplærte fagfolk.
- Menneskeblod bør håndteres som potensielt smittsomt, og universelle forholdsregler bør følges.
- Avhending av alt avfallsmateriale skal skje i samsvar med lokale, statlige og føderale retningslinjer.
- Ikke bruk rør hvis det er fremmedlegemer i røret.
- Ikke bruk rør etter utløpsdatoen.

### **Forholdsregler for blodinnsamling**

- Bruk 21 gauge eller større kanyler (18-20 gauge) for blodinnsamling.
- Bland blodet ved å vende røret forsiktig 5 ganger umiddelbart etter påfylling.

### **Oppbevaring og stabilitet**


- Oppbevar ubrukte oppsamlingsrør ved 5 til 30 °C. Unngå eksponering for direkte sollys.
- Produktet er stabilt til utløpsdatoen som er trykt på etiketten på røret når det oppbevares under disse forholdene.

Merk: Avvik fra anbefalte oppbevaringsforhold kan føre til svekkelse av rørkvaliteten.

## Referanser

For ytterligere informasjon om målinger ved bruk av BAPA tube for T-TAS 01, se brukerhåndboken for T-TAS 01 og analysevedlegg(er).

## Symboler

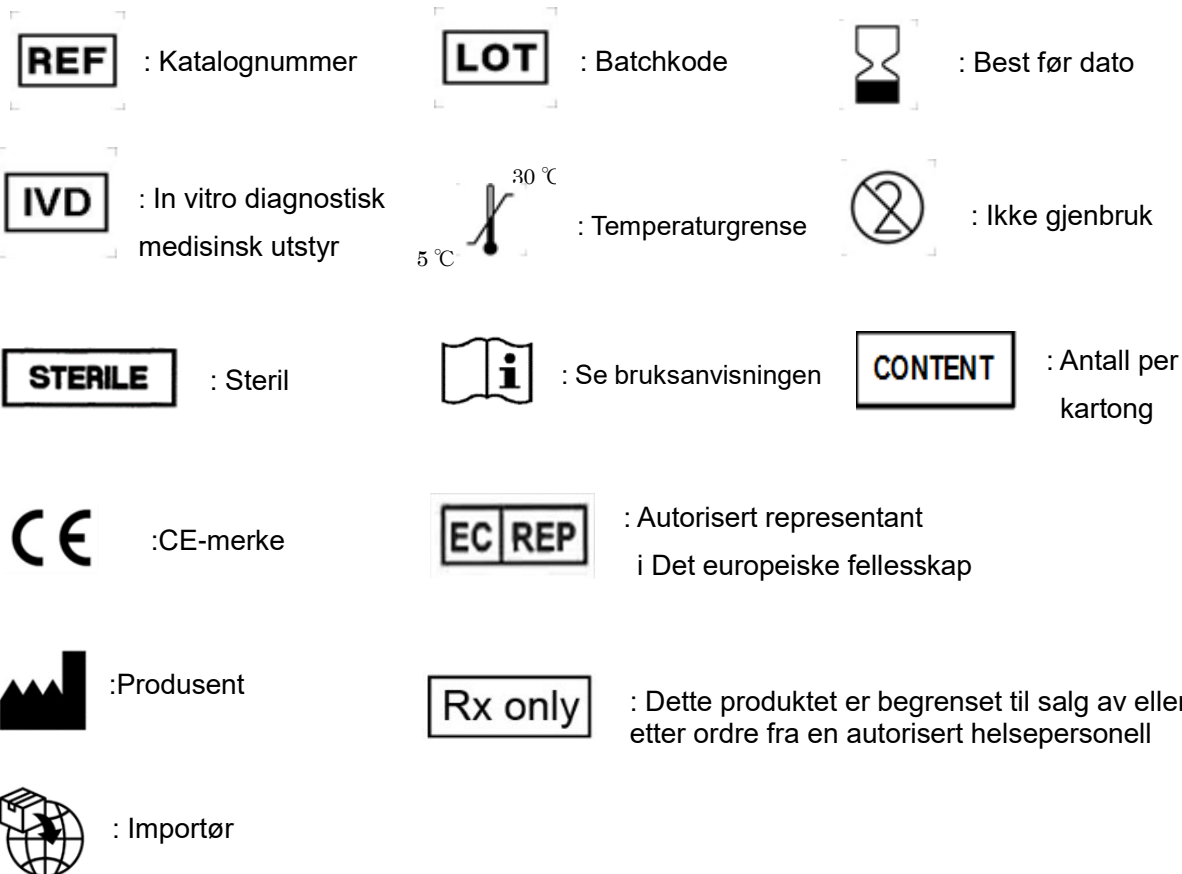

FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

