

Norsk

BAPA tube

REF	18004	CONTENT	50 rør
------------	-------	----------------	--------

Tiltenkt bruk

BAPA tube er beregnet på å brukes til innsamling, transport og lagring av blodprøver for bruk med T-TAS - systemet.

Sammendrag

BAPA (Benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamid), en hemmer av trombin og faktor Xa, tillater antikoagulasjon av blod uten å forstyrre fysiologiske kalsiumnivåer.

Den spesifiserte konsentrasjonen av BAPA i oppsamlet blod er $\geq 50 \mu\text{g/mL}$.

Blodprøverør

50 x 3 ml rør som inneholder spraytørket BAPA antikoagulant

Advarsler og forholdsregler

- Kun for in vitro diagnostisk bruk.
- Kun til bruk av opplærte fagfolk.
- Menneskeblod bør håndteres som potensielt smittsomt, og universelle forholdsregler bør følges.
- Avhending av alt avfallsmateriale skal skje i samsvar med lokale, statlige og føderale retningslinjer.
- Ikke bruk rør hvis det er fremmedlegemer i røret.
- Ikke bruk rør etter utløpsdatoen.

Forholdsregler for blodinnsamling

- Bruk 21 gauge eller større kanyler (18-20 gauge) for blodinnsamling.
- Bland blodet ved å vende røret forsiktig 5 ganger umiddelbart etter påfylling.

Oppbevaring og stabilitet

- Oppbevar ubrukte oppsamlingsrør ved 5 til 30 °C. Unngå eksponering for direkte sollys.
- Produktet er stabilt til utløpsdatoen som er trykt på etiketten på røret når det oppbevares under disse forholdene.

Merk: Avvik fra anbefalte oppbevaringsforhold kan føre til svekkelse av rørkvaliteten.

Referanser

For ytterligere informasjon om målinger ved bruk av BAPA tube, se brukerhåndboken for T-TAS og analysevedlegg(er).

Symboler



: Katalognummer




: Batchkode



: Best før dato



: In vitro diagnostisk
medisinsk utstyr

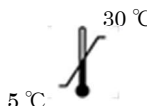

: Temperaturgrense



: Ikke gjenbruk



: Steril



: Se bruksanvisningen



: Antall per
kartong




: CE-merke



: Autorisert representant
i Det europeiske fellesskap



: Produsent

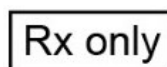

: Dette produktet er begrenset til salg av eller
etter ordre fra en autorisert helsepersonell



: Importør



ZACROS Corporation

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH

Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

