

## **Polski**

# BAPA tube for T-TAS<sup>®</sup>01

**REF**

18004

**CONTENT**

50 probówek

### **Przeznaczenie**

BAPA tube do T-TAS 01 jest przeznaczona do pobierania, transportu i przechowywania próbek krwi do użytku z systemem T-TAS 01.

### **Streszczenie**

BAPA (Benzylosulfonylo-D-argininyl-prolilo-4-amidynobenzoyloamid), inhibitor trombiny i czynnika Xa, umożliwia antykoagulację krwi bez ingerencji w fizjologiczne poziomy wapnia.

Określone stężenie BAPA w pobranej krwi wynosi  $\geq 50\mu\text{g/ml}$ .

### **Probówka do pobierania krwi**

50 x 3ml probówki zawierające suszony rozpyłowo antykoagulant BAPA

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
- Do użytku tylko przez przeszkolonych specjalistów.
- Krew ludzka powinna być traktowana jako potencjalnie zakaźna i w związku z tym należy przestrzegać stosownych środków ostrożności.
- Utylizacja wszystkich odpadów powinna być przeprowadzana zgodnie z lokalnymi, stanowymi i federalnymi wytycznymi.
- Nie używać probówek, jeśli w probówce znajdują się ciała obce.
- Nie używać probówek po upływie ich terminu ważności.

### **Środki ostrożności dotyczące pobierania krwi**

- Do pobierania krwi należy używać igieł o rozmiarze 21G lub większej średnicy (18–20G).
- Wymieszać krew, delikatnie odwracając probówkę 5 razy bezpośrednio po jej napełnieniu.

### **Przechowywanie i stabilność**

- Niewykorzystane probówki należy przechowywać w temperaturze od 5 do 30°C. Unikać ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt przechowywany w powyższych warunkach zachowuje stabilność do daty ważności wydrukowanej na etykiecie probówki.

Uwaga: Odstępstwo od zalecanych warunków przechowywania może prowadzić do pogorszenia

jakości próbki.

## Bibliografia

Dodatkowe informacje na temat pomiarów z użyciem BAPA tube for T-TAS 01 można znaleźć w Podręczniku użytkownika T-TAS 01 i dołączonych ulotkach.

## Symbole



: Numer katalogu




: Kod partii



: Data ważności



: Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

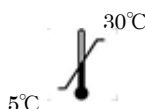

: Ograniczenie temperatury




: Nie używać ponownie



: Wyrób poddany sterylizacji




: Sprawdzić instrukcję obsługi

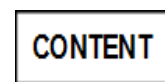

: Ilość w kartonie




: Oznakowanie CE

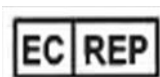

: Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej



: Producent

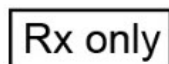

: Sprzedaż tego produktu jest ograniczona do sprzedaży przez licencjonowanego lekarza lub na jego zlecenie



: Importer



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

