

Polski

BAPA tube

REF

18004

CONTENT

50 probówek

Przeznaczenie

BAPA tube jest przeznaczona do pobierania, transportu i przechowywania próbek krwi do użytku z systemem T-TAS.

Streszczenie

BAPA (Benzylosulfonylo-D-argininyl-prolilo-4-amidynobenzylamid), inhibitor trombiny i czynnika Xa, umożliwia antykoagulację krwi bez ingerencji w fizjologiczne poziomy wapnia.

Określone stężenie BAPA w pobranej krwi wynosi $\geq 50\mu\text{g/ml}$.

Probówka do pobierania krwi

50 x 3ml probówki zawierające suszony rozpyłowo antykoagulant BAPA

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
- Do użytku tylko przez przeszkolonych specjalistów.
- Krew ludzka powinna być traktowana jako potencjalnie zakaźna i w związku z tym należy przestrzegać stosownych środków ostrożności.
- Utylizacja wszystkich odpadów powinna być przeprowadzana zgodnie z lokalnymi, stanowymi i federalnymi wytycznymi.
- Nie używać probówek, jeśli w probówce znajdują się ciała obce.
- Nie używać probówek po upływie ich terminu ważności.

Środki ostrożności dotyczące pobierania krwi

- Do pobierania krwi należy używać igieł o rozmiarze 21G lub większej średnicy (18–20G).
- Wymieszać krew, delikatnie odwracając probówkę 5 razy bezpośrednio po jej napełnieniu.

Przechowywanie i stabilność

- Niewykorzystane probówki należy przechowywać w temperaturze od 5 do 30°C. Unikać ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt przechowywany w powyższych warunkach zachowuje stabilność do daty ważności wydrukowanej na etykiecie probówki.

Uwaga: Odstępstwo od zalecanych warunków przechowywania może prowadzić do pogorszenia

jakości próbówki.

Bibliografia

Dodatkowe informacje na temat pomiarów z użyciem BAPA tube można znaleźć w Podręczniku użytkownika T-TAS i dołączonych ulotkach.

Symbole



: Numer katalogu




: Kod partii



: Data ważności



: Wyrób medyczny
do diagnostyki in
vitro

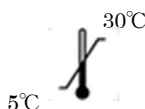

: Ograniczenie
temperatury



: Nie używać
ponownie



: Wyrób
poddany
sterylizacji




: Sprawdzić
instrukcję obsługi



: Ilość w
kartonie




: Oznakowanie CE

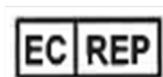

: Upoważniony przedstawiciel
we Wspólnocie Europejskiej



: Producent

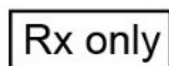

: Sprzedaż tego produktu jest ograniczona
do sprzedaży przez licencjonowanego
lekarza lub na jego zlecenie



: Importer



ZACROS Corporation

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH

Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

