

Español

BAPA tube for T-TAS[®]01

REF

18004

CONTENT

50 tubos

Uso previsto

El tubo BAPA para T-TAS 01 está diseñado para usarse en la extracción, transporte y almacenamiento de muestras de sangre para su uso con el sistema T-TAS 01.

Resumen

El BAPA (Bencilsulfonil-D-argininil-prolil-4-amidinobencilamida), un inhibidor de la trombina y el factor Xa, permite la anticoagulación de la sangre sin interferir con los niveles fisiológicos de calcio. La concentración especificada de BAPA en la sangre extraída es $\geq 50 \mu\text{g/mL}$.

Tubo de extracción de sangre

50 tubos de 3 mL que contienen anticoagulante BAPA secado por aspersion

Advertencias y precauciones

- Sólo para uso diagnóstico in vitro.
- Para uso exclusivo de profesionales calificados.
- La sangre humana debe manipularse como potencialmente infecciosa y deben seguirse las precauciones universales.
- La eliminación de todo el material de desecho debe hacerse de acuerdo con las directivas locales, estatales y federales.
- No utilice los tubos si hay elementos extraños en el tubo.
- No utilice los tubos después de su fecha de caducidad.

Precauciones para la extracción de sangre

- Use agujas de 21 G o más grandes (calibre 18-20) para la extracción de sangre.
- Mezclar la sangre invirtiendo suavemente el tubo 5 veces inmediatamente después de llenarlo.

Almacenamiento y estabilidad





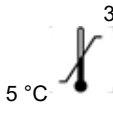





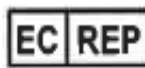

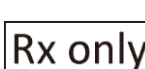

- Almacenar los tubos de extracción no utilizados entre 5 y 30 °C. Evitar la exposición a la luz solar directa.
- El producto es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del tubo cuando se almacena en estas condiciones.

Nota: La desviación de las condiciones de almacenamiento recomendadas puede causar deterioro de la calidad del tubo.

Referencias

Para información adicional sobre las mediciones con el tubo BAPA para T-TAS 01, consulte el Manual de Usuario del T-TAS 01 y el (los) prospecto(s) del ensayo.

Símbolos

 : Número de catálogo	 : Código de lote	 : Fecha de caducidad
 : Para uso diagnóstico in vitro	 : Límite de temperatura 5 °C 30 °C	 : No reutilizar
 : Esterilización por radiación	 : Consultar las instrucciones de uso	 : Cantidad por caja
 : Conformidad europea	 : Representante autorizado en la Unión Europea	
 : Fabricante	 : Este dispositivo está restringido a la venta por o bajo la orden de un profesional sanitario con licencia.	
 : Importador		



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

