

Español

BAPA tube

REF	18004	CONTENT	50 tubos
------------	-------	----------------	----------

Uso previsto

El BAPA tube está diseñado para usarse en la extracción, transporte y almacenamiento de muestras de sangre para su uso con el sistema T-TAS.

Resumen

El BAPA (Bencilsulfonil-D-argininil-prolil-4-amidinobencilamida), un inhibidor de la trombina y el factor Xa, permite la anticoagulación de la sangre sin interferir con los niveles fisiológicos de calcio. La concentración especificada de BAPA en la sangre extraída es $\geq 50 \mu\text{g/mL}$.

Tubo de extracción de sangre

50 tubos de 3 mL que contienen anticoagulante BAPA secado por aspersión

Advertencias y precauciones

- Sólo para uso diagnóstico in vitro.
- Para uso exclusivo de profesionales calificados.
- La sangre humana debe manipularse como potencialmente infecciosa y deben seguirse las precauciones universales.
- La eliminación de todo el material de desecho debe hacerse de acuerdo con las directivas locales, estatales y federales.
- No utilice los tubos si hay elementos extraños en el tubo.
- No utilice los tubos después de su fecha de caducidad.

Precauciones para la extracción de sangre

- Use agujas de 21 G o más grandes (calibre 18-20) para la extracción de sangre.
- Mezclar la sangre invirtiendo suavemente el tubo 5 veces inmediatamente después de llenarlo.

Almacenamiento y estabilidad

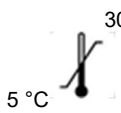
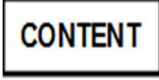
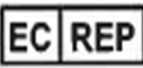
- Almacenar los tubos de extracción no utilizados entre 5 y 30 °C. Evitar la exposición a la luz solar directa.
- El producto es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del tubo cuando se almacena en estas condiciones.

Nota: La desviación de las condiciones de almacenamiento recomendadas puede causar deterioro de la calidad del tubo.

Referencias

Para información adicional sobre las mediciones con el BAPA tube, consulte el Manual de Usuario del T-TAS y el (los) prospecto(s) del ensayo.

Símbolos

 : Número de catálogo	 : Código de lote	 : Fecha de caducidad
 : Para uso diagnóstico in vitro	 : Límite de temperatura	 : No reutilizar
 : Esterilización por radiación	 : Consultar las instrucciones de uso	 : Cantidad por caja
 : Conformidad europea	 : Representante autorizado en la Unión Europea	
 : Fabricante	 : Este dispositivo está restringido a la venta por o bajo la orden de un profesional sanitario con licencia.	
 : Importador		



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® es una marca registrada de ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

Todos los derechos reservados

