

Svenska

BAPA tube

REF	18004	CONTENT	50 rör
------------	-------	----------------	--------

Avsedd användning

BAPA tube är avsett att användas för insamling, transport och förvaring av blodprover för användning med T-TAS-systemet.

Sammanfattning

BAPA (Benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamide), en hämmare av trombin och faktor Xa, tillåter antikoagulering av blod utan att störa fysiologiska kalciumnivåer.

Den specificerade koncentrationen av BAPA i uppsamlat blod är $\geq 50 \mu\text{g/ml}$.

Bloduppsamlingsrör

50 x 3 ml rör som innehåller spraytorkat BAPA antikoagulantia

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Endast för in vitro-diagnostik.
- Endast för användning av utbildad personal.
- Människoblod ska hanteras som potentiellt smittsamt och allmänna försiktighetsåtgärder bör följas.
- Bortskaffande av allt avfallsmaterial ska ske i enlighet med lokala, statliga och federala riktlinjer.
- Använd inte rör om främmande ämnen finns i röret.
- Använd inte tuber efter utgångsdatum.

Försiktighetsåtgärder vid blodinsamling

- Använd 21 gauge eller större kanyl (18-20 gauge) vid bloduppsamling.
- Blanda blodet genom att försiktigt vända röret 5 gånger direkt efter påfyllning.

Förvaring och stabilitet

- Förvara oanvända uppsamlingsrör vid 5 till 30 °C. Undvik exponering för direkt solljus.
- När den förvaras vid dessa förhållanden är produkten stabil fram till utgångsdatumet som är tryckt på rörets etikett.

Notera: Avvikelse från rekommenderade lagringsförhållanden kan leda till försämring av rörkvaliteten.

Referenser

För ytterligare information om mätningar med BAPA tube, se T-TAS användarhandbok och analysbipacksedel(ar).

Symboler



: Katalognummer




: Partikod



: Sista
användningsdatum



: Medicinsk enhet för
in vitro-diagnostik

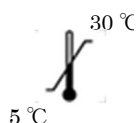

: Temperaturgräns




: Återanvänd inte



: Steril



: Se
bruksanvisningen

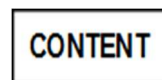

: Antal per
kartong




: CE-märkning



: Auktoriserad representant
i Europeiska gemenskapen



: Tillverkare

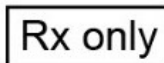

: Denna produkt är begränsad till försäljning
av eller på order av en legitimerad läkare



: Importör



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

