

Nederlands

BAPA tube

REF	18004	CONTENT	50 buisjes
------------	-------	----------------	------------

Beoogd gebruik

BAPA tube is bedoeld voor de afname, het transport, en de opslag van bloedmonsters voor gebruik met het T-TAS systeem.

Overzicht

BAPA (Benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamide) is een remmer van trombine en factor Xa, die bloedstolling tegengaat zonder de fysiologische calciumniveaus te beïnvloeden.

De gespecificeerde concentratie van BAPA in afgenomen bloed is $\geq 50 \mu\text{g/ml}$.

Bloedafnamebuisje

50 x 3 ml buisjes met gesproeidroogd BAPA antistollingsmiddel

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend bedoeld voor in-vitrodiagnostiek.
- Uitsluitend voor gebruik door correct opgeleide professionals.
- Menselijk bloed moet worden behandeld als mogelijk besmettelijk, en universele voorzorgsmaatregelen dienen daarom in acht te worden genomen.
- Verwijdering van het afvalmateriaal moet gebeuren in overeenstemming met lokale, provinciale, en federale richtlijnen.
- Gebruik buisjes niet als buisjes vreemde stoffen bevatten.
- Gebruik buisjes niet na hun uiterste houdbaarheidsdatum.

Voorzorgsmaatregelen bij het afnemen van bloed

- Gebruik naalden van maat 21 G of groter (18-20 G) voor het afnemen van bloed.
- Meng het bloed door het buisje onmiddellijk na het vullen 5 keer voorzichtig om te keren.

Opslag en stabiliteit

- Bewaar ongebruikte afnamebuisjes bij 5 tot 30 °C. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Het product is stabiel tot de uiterste houdbaarheidsdatum, die is afgedrukt op het etiket van het buisje, verstreken is en indien het is bewaard onder deze voorwaarden.

Opmerking: Afwijken van de aanbevolen opslagvoorwaarden kan leiden tot verslechtering van de

kwaliteit van de buisjes.

Referenties

Raadpleeg de gebruikershandleiding van T-TAS en de bijsluiter(s) van de tests voor meer informatie over metingen met BAPA tube.

Symbolen



: Catalogusnummer




: Partijcode



: Houdbaarheidsdatum



: Medisch apparaat
bedoeld voor

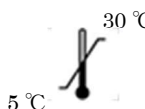

: Temperatuurlimiet



: Niet hergebruiken



: Steriel




: Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



: Aantal per
doos




: CE-markering

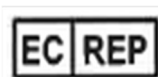

: Gemachtigde
vertegenwoordiger



: Fabrikant

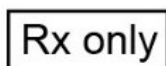

: Dit product mag uitsluitend worden verkocht door of
op voorschrift van een bevoegde zorgverlener



: Importeur



ZACROS Corporation

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH

Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

