

Português

BAPA tube

REF	18004	CONTENT	50 tubos
------------	-------	----------------	----------

Uso pretendido

O BAPA tube destina-se a ser usado na recolha, transporte e armazenamento de amostras de sangue para uso com o sistema T-TAS.

Resumo

O BAPA (Benzilsulfonil-D-argininil-prolil-4-amidinobenzilamida), um inibidor da trombina e do fator Xa, permite a anticoagulação do sangue sem interferência nos níveis fisiológicos de cálcio.

A concentração especificada de BAPA no sangue recolhido é $\geq 50 \mu\text{g/mL}$.

Tubo de recolha de sangue

Tubos de 50 x 3 ml contendo anticoagulante BAPA seco por pulverização

Avisos e precauções

- Apenas para uso em diagnóstico in vitro.
- Para uso apenas por profissionais formados para o efeito.
- O sangue humano deve ser tratado como potencialmente infeccioso e devem ser utilizadas Precauções Universais.
- O descarte de todo o material residual deve estar de acordo com as diretrizes locais, regionais e nacionais.
- Não use um tubo se houver qualquer matéria estranha no mesmo.
- Não use tubos após a data de validade.

Precauções para recolha de sangue

- Use agulhas de calibre 21 ou de calibre superior (calibre 18-20) para recolha de sangue.
- Misture o sangue invertendo suavemente o tubo 5 vezes imediatamente após o enchimento.

Armazenamento e estabilidade

- Armazene os tubos de recolha não utilizados entre 5 e 30°C. Evite a exposição à luz solar direta.
- O produto é estável até à data de validade impressa no rótulo do tubo quando armazenado nestas condições.

Observação: Qualquer desvio das condições de armazenamento recomendadas pode prejudicar a qualidade do tubo.

Referências

Para obter informações adicionais sobre medições com o BAPA tube, consulte o Manual do Utilizador do T-TAS e os folhetos informativos de ensaio.

Símbolos



: Número de catálogo




: Código do lote



: Data de validade



: Dispositivo médico
para diagnóstico in
vitro

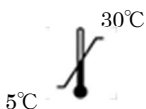

: Limite de
temperatura




: Não reutilize



: Estéril



: Consulte as
instruções de
utilização

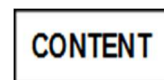

: Quantidade
por caixa




Marca CE



: Representante autorizado
na Comunidade Europeia



:Fabricante

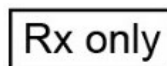

: Este produto está restrito à venda por
ou por ordem de um profissional de
saúde licenciado



: Importador



ZACROS Corporation

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH

Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

