

Français

BAPA tube for T-TAS[®]01

REF	18004	CONTENT	50 tubes
------------	-------	----------------	----------

Utilisation prévue

Le tube BAPA pour T-TAS 01 est conçu aux fins de servir au prélèvement, au transport et au stockage d'échantillons sanguins à utiliser avec le système T-TAS 01.

Résumé

Le BAPA (benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamide) est un inhibiteur de la thrombine et du facteur Xa, qui permet une anticoagulation du sang sans interférer avec les concentrations physiologiques de calcium.

La concentration spécifiée de BAPA dans le sang prélevé est $\geq 50 \mu\text{g/mL}$.

Tube de prélèvement sanguin

50 tubes de 3 mL contenant de l'anticoagulant BAPA séché par pulvérisation

Mises en garde et précautions

- Réservé à un usage diagnostique in vitro.
- À utiliser uniquement par des professionnels dûment formés.
- Le sang humain doit être manipulé comme un produit potentiellement infectieux et les précautions standard doivent être respectées.
- L'élimination de l'ensemble des déchets doit être conforme aux directives locales, régionales et nationales.
- Ne pas utiliser les tubes si des corps étrangers se trouvent à l'intérieur.
- Ne pas utiliser les tubes après leur date de péremption.

Précautions relatives au prélèvement sanguin

- Utiliser des aiguilles de calibre 21 G ou moins (calibre 18-20) pour le prélèvement sanguin.
- Immédiatement après le remplissage, mélanger le sang en retournant doucement le tube 5 fois.

Conservation et stabilité





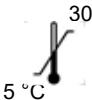



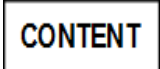



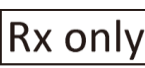

- Conserver les tubes de prélèvement non utilisés entre 5 et 30 °C. Éviter l'exposition directe au soleil.
- Le produit est stable jusqu'à la date de péremption imprimée sur le tube lorsqu'il est conservé dans ces conditions.

Remarque : Tout non-respect des conditions de conservation recommandées peut entraîner une détérioration de la qualité du tube.

Références

Pour plus d'informations sur les mesures utilisant le tube BAPA pour le T-TAS 01, veuillez vous référer au mode d'emploi du T-TAS 01 et aux notices du test.

Symboles

 : Numéro de référence	 : Code de lot	 : Date limite d'utilisation
 : Usage réservé au diagnostic in vitro	 : Limites de température	 : Ne pas réutiliser
 : Stérilisation par radiation	 : Consulter les instructions d'utilisation	 : Quantité par carton
 : Marquage CE	 : Représentant autorisé dans la Communauté européenne	
 : Fabricant	 : Cet appareil ne peut être vendu que par un professionnel de santé agréé ou sur ordre de ce dernier.	
 : Importateur		



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



EU Importer

MedEnvoy

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

