

## **Dansk**

# BAPA tube for T-TAS<sup>®</sup> 01

**REF**

18004

**CONTENT**

50 rør

### **Tilsligtet anvendelse**

BAPA tube til T-TAS 01 er beregnet til at blive brugt til indsamling, transport og opbevaring af blodprøver til brug med T-TAS 01systemet.

### **Sammenfatning:**

BAPA (Benzylsulfonfyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamid), som er en inhibitor af thrombin og faktor Xa, tillader antikoagulering af blod uden at forstyrre fysiologiske calciumniveauer.

Den specificerede koncentration af BAPA i opsamlet blod er  $\geq 50 \mu\text{g/mL}$ .

### **Rør til blodprøvetagning**

50 x 3 mL rør indeholdende spraytørret BAPA antikoagulant

### **Advarsler og forholdsregler**

- Kun til in vitro-diagnostisk brug.
- Bør kun anvendes af uddannede fagfolk.
- Menneskeblod bør håndteres som potentielt smittefarligt materiale, og Universal Precautions (universelle forholdsregler) bør følges.
- Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale retningslinjer.
- Brug ikke et rør, hvis der findes fremmedlegemer i det.
- Brug ikke rør efter deres udløbsdato.

### **Forholdsregler for blodprøvetagning**

- Brug 21 gauge eller større nåle (18-20 gauge) til blodprøvetagning.
- Bland blodet ved forsigtigt at vende røret 5 gange op og ned umiddelbart efter påfyldning.

### **Opbevaring og stabilitet**

- Opbevar ubrugte opsamlingsrør ved 5 til 30 °C. Undgå udsættelse for direkte sollys.
- Produktet er stabilt indtil udløbsdatoen trykt på tubeetiketten, når det opbevares under disse forhold.

Bemærk: Afvigelse fra de anbefalede opbevaringsbetingelser kan føre til forringelse af rørets kvalitet.

## Referencer

For yderligere information om målinger ved brug af BAPA tube for T-TAS 01 henvises til T-TAS 01-brugervejledningen og assayets indlægssedel/indlægssedler.

## Symboler



: Katalognummer




: Batchkode



: Sidste  
anvendelsesdato



: In vitro-diagnostisk  
medicinsk udstyr

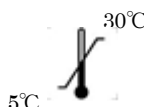

: Temperaturgrænse



: Må ikke  
genbruges



: Steril



: Se brugsanvisningen



: Antal pr.  
karton




: CE-mærke



: Autoriseret repræsentant  
i Det Europæiske Fællesskab



: Producent

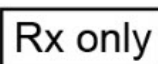

: Dette produkt er begrænset til salg af eller  
ved anvisning af autoriseret



: Importør



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo  
112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

