

Dansk

BAPA tube

REF	18004	CONTENT	50 rør
------------	-------	----------------	--------

Tilsigtet anvendelse

BAPA tube er beregnet til at blive brugt til indsamling, transport og opbevaring af blodprøver til brug med T-TAS systemet.

Sammenfatning:

BAPA (Benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamid), som er en inhibitor af thrombin og faktor Xa, tillader antikoagulering af blod uden at forstyrre fysiologiske calciumniveauer.

Den specificerede koncentration af BAPA i opsamlet blod er $\geq 50 \mu\text{g/mL}$.

Rør til blodprøvetagning

50 x 3 mL rør indeholdende spraytørret BAPA antikoagulant

Advarsler og forholdsregler

- Kun til in vitro-diagnostisk brug.
- Bør kun anvendes af uddannede fagfolk.
- Menneskeblod bør håndteres som potentielt smittefarligt materiale, og Universal Precautions (universelle forholdsregler) bør følges.
- Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale retningslinjer.
- Brug ikke et rør, hvis der findes fremmedlegemer i det.
- Brug ikke rør efter deres udløbsdato.

Forholdsregler for blodprøvetagning

- Brug 21 gauge eller større nåle (18-20 gauge) til blodprøvetagning.
- Bland blodet ved forsigtigt at vende røret 5 gange op og ned umiddelbart efter påfyldning.

Opbevaring og stabilitet

- Opbevar ubrugte opsamlingsrør ved 5 til 30 °C. Undgå udsættelse for direkte sollys.
- Produktet er stabilt indtil udløbsdatoen trykt på tubeetiketten, når det opbevares under disse forhold.

Bemærk: Afvigelse fra de anbefalede opbevaringsbetingelser kan føre til forringelse af rørets kvalitet.

Referencer

For yderligere information om målinger ved brug af BAPA tube henvises til T-TAS-brugervejledningen og assayets indlægssedel/indlægssedler.

Symboler



: Katalognummer




: Batchkode



: Sidste
anvendelsesdato



: In vitro-diagnostisk
medicinsk udstyr

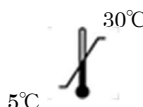

: Temperaturgrænse




: Må ikke
genbruges



: Steril




: Se brugsanvisningen

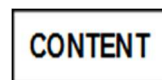

: Antal pr.
karton




: CE-mærke

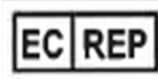

: Autoriseret repræsentant
i Det Europæiske Fællesskab



: Producent

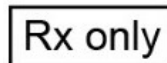

: Dette produkt er begrænset til salg af eller
ved anvisning af autoriseret



: Importør



ZACROS Corporation

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH

Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

